

Maintien à domicile

Le lit médicalisé permet à une personne en situation de handicap de rentrer ou de sortir de son lit en toute sécurité.

Il facilite les transferts, la toilette et les soins dispensés par les auxiliaires de vie ou les aidants.

La hauteur y est adaptable, idéal pour les transferts et prévient les douleurs dorsales des aidants.

Pour satisfaire aux besoins de chacun, les lits médicalisés se déclinent en différents modèles et fonctions.

### INFOS A PRENDRE EN COMPTE :

- Le poids maximum supporté indiqué inclut le poids du matelas.
- Un lit médicalisé existe aussi en version lit double.
- Certaines options seront nécessaires :
  - Potence
  - Barrières
- Soyez vigilant au bon choix de votre matelas selon votre risque d'escarres.



### RELEVÉ-BUSTE ET RELEVÉ-JAMBES ÉLECTRIQUES POUR AMÉLIORER :

- Le confort
- La circulation
- La mobilisation
- La prévention des escarres
- Les soins

### TELECOMMANDE

Veillez à vous assurer de sa bonne préhension et compréhension.



### REGLAGE EN HAUTEUR

- Aide pour s'asseoir et se relever
- Facilite les soins

Photos et dimensions non contractuelles

### Lit médicalisé 90 cm 2 ou 3 fonctions



- Fonction 1 et 2 : relève-buste et hauteur variable.
- Fonction 3 : plicature électrique maintien le pliage des genoux, relève-jambes manuel.
- Barrières bois ou métalliques.
- 4 roulettes avec frein.
- Potence amovible livrée avec anneau porte sérum.
- Télécommande à fil.
- Compatible avec l'ensemble des lève-personnes.
- Taille du matelas 90x200 cm.



### Lit ultra-bas 3 fonctions


- Fonction 1 et 2 : relève-buste et hauteur variable.
- Fonction 3 : plicature électrique maintien le pliage des genoux, relève-jambes manuel.
- Lit surbaissé, rassurant et sécurisant pour les personnes désorientées ou de petite taille.
- Hauteur allant de 20 à 72 cm maximum.
- Barrières bois ou métalliques.
- Télécommande à fil.
- Compatible avec l'ensemble des lève-personnes du marché.
- Taille du matelas 90x200 cm.



Photos et dimensions non contractuelles

### Lit médicalisé 80 cm Junior

- Idéal pour un enfant de 3 à 12 ans.
- Barrières ultra légères et résistantes.
- Hauteur variable.
- Relève-jambes électrique à plicature.
- Support potence avec anneau porte sérum.
- Télécommande à fil verrouillable par clé magnétique.
- Taille du matelas 70x170 cm.

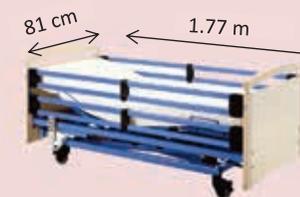



**Lit médicalisé 120 cm 2 ou 3 fonctions**

- Fonction 1 et 2 : relève-buste et hauteur variable.
- Fonction 3 : plicature des genoux avec relève-jambes manuels.
- Idéal pour les personnes de forte corpulence.
- Barrières en bois ou métalliques.
- 4 roulettes avec freins.
- Potence amovible livrée avec anneau porte sérum.
- Télécommande à fil.
- Compatible avec l'ensemble des lève-personnes.
- Taille du matelas 120x200 cm.



**Lit médicalisé 140 cm simple ou double sommier 2 ou 3 fonctions**

- Fonction 1 et 2 : relève-buste et hauteur variable.
- Fonction 3 : plicature des genoux avec relève-jambes manuels.
- Idéal pour les personnes en couple.
- Barrières en bois ou métalliques.
- 4 roulettes avec freins.
- Les potences de lit sont amovibles livrées avec anneau porte sérum.
- Télécommande à fil.
- Compatible avec l'ensemble des lève-personnes du marché.
- Taille du matelas 140x200 cm ou 70x200 cm pour le double sommier.



Photos et dimensions non contractuelles

Les matelas offrent un couchage adapté aux personnes alitées continuellement, s'adaptent à toutes les tailles de lit et se choisissent en fonction de l'état du patient, de sa morphologie, de son poids et du nombre d'heures passées au lit.

Ils sont conçus pour améliorer les résultats cliniques des patients par la prévention et le soin des complications engendrées par l'immobilité. Ils garantissent une aide efficace dans la prévention et le traitement des escarres.

MATELAS	DESCRIPTIFS	INDICATIONS D'AIDE AU TRAITEMENT DE L'ESCARRE
<p>Matelas hébergement</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Matelas en mousse adapté pour un usage transitoire.</li> <li>• Convient aux personnes présentant un risque d'escarre nul.</li> </ul> <p>R</p>	<p>RISQUE D'ESCARRE NUL</p>
<p>Matelas mémoire de forme</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permet une meilleure répartition des zones de portance du corps.</li> <li>• Diminution des pressions transcutanées sur les zones à risque élevé.</li> <li>• Irrigation sanguine facilitée.</li> </ul> <p>R</p>	<p>RISQUE D'ESCARRE FAIBLE A MOYEN</p>
<p>Matelas à air</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Matelas efficace pour le traitement des escarres.</li> <li>• Permet une décharge du poids sur tout le corps.</li> <li>• Deux modes différents :                         <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Alternatif</b> (les cellules se gonflent alternativement de façon régulière)</li> <li>- <b>Statique</b> (les cellules se gonflent en fonction des mouvements de la personne)</li> </ul> </li> </ul> <p>R</p>	<p>RISQUE D'ESCARRE ELEVE</p>

Photos et dimensions non contractuelles

Ces dispositifs de positionnement offrent de nombreux avantages :

- Permettent de positionner le patient de façon à réaliser une mise en décharge totale ou partielle d'une zone à risque.
- Assurent le maintien du positionnement du patient.
- Simple d'utilisation, rapide à mettre en place tout au long de la journée.

### Les décharges talonnières

- Décharge complète de la zone talonnière.
- Indiqué lors d'escarres talonnières constituées.

R



### Les décharges talonnières attelle

- Stabilise la cheville en flexion plantaire.
- Décharge de l'appui du talon.
- Longueur de la botte procurant un soutien du genou (évite l'hyper extension).

R



R

### Les décharges des cervicales

- Moule tout en douceur les contours de la zone cervicale et réduit significativement les points de pression douloureux sur la nuque.
- Améliore la circulation sanguine par diminution des points d'appui.
- Respecte la courbure naturelle des vertèbres.



### Les décharges diverses

- Mémoire de forme.
- Peut s'utiliser pour calage dans un fauteuil de repos, roulant ou coquille.
- Aide au calage pour décharger l'appui des talons, protection des faces latérales internes des genoux, des chevilles ....

R



Photos et dimensions non contractuelles

### Prévention des escarres au niveau : trochanter, sacrum et talons

- Position recommandée en décubitus latéral oblique 30°.
- 2 tailles pour une adaptation optimale à la morphologie des patients.
- Un oreiller intégré pour le confort de l'utilisateur.
- Une installation facile, sans effort et rapide.
- Un maintien stable et durable.


R



### Prévention des escarres au niveau : coudes et talons

- Position recommandée pour la mise en décharge totale des coudes et des talons en décubitus dorsal.
- Une inclinaison modérée préservant la circulation sanguine.
- Une architecture non traumatique.
- Une forme malléable.

R

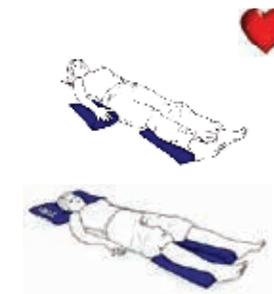

### Prévention des escarres au niveau : sacrum, ischiens et talons

- Position recommandée dite de type semi-fowler pour réduire la pression ischiatique (au niveau de la hanche) et talonnière, et le cisaillement de la peau au niveau du sacrum.
- La réduction du « glissé avant ».
- Un maintien latéral du tronc.
- Une alternative au lit avec sommier non articulé.


R



### Prévention des escarres au niveau : malléoles et genoux

- Position recommandée pour l'abduction des membres inférieurs afin de réduire la pression d'appui au niveau des malléoles et des genoux.
- Le maintien des membres inférieurs en abduction.
- La réduction des points de contact entre les genoux.

R

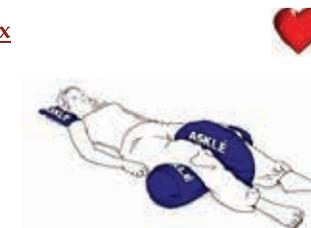

Une barrière latérale sert à éviter que le dormeur ne tombe durant son sommeil.

Les protections de barrière protègent les personnes agitées des chocs, coincements et isolent également du froid.



**Barrière de lit escamotable modulable**



- Sécurise une personne dans son lit.
- Escamotable vers le bas grâce à 2 clips faciles à saisir et s'étendent en 3 longueurs différentes grâce à un seul clip (66 cm, 86 cm et 107 cm).
- Adaptable sur sommier tapissier ou à lattes.
- Livré avec un filet de rangement.
- Hauteur de barrière 33 cm.



**Barrière de lit escamotable**

- Sécurise une personne dans son lit.
- Les supports de la barre se positionnent entre le sommier et le matelas avec des lanières et des fixations supplémentaires pour l'autre côté du lit.
- La barrière s'escamote par simple pression des 2 barres du milieu. Une fois en position droite, elle se sécurise à nouveau automatiquement.



Photos et dimensions non contractuelles



**Protection de barrière de lit simple ou double**

- Protection en mousse recouverte d'une enveloppe bactériostatique non feu M1 respirant et très confortable.
- S'adapte sur toutes les longueurs de barrières.
- Evite le contact du métal, protège et sécurise le patient.
- Protège un ou deux côtés du lit.



Une barre de lit appelé aussi barre latérale de redressement apporte une aide à la stabilité pour s'asseoir dans le lit et facilite le passage des pieds hors du lit sans risque de basculement en arrière.

Assis au bord du lit, la personne s'aide de la barre d'appui qui offre un soutien pour se mettre debout et inversement pour se coucher.



**Barre d'appui au lit large**

- La base de la barre d'appui est placée sous le matelas.
- Une lanière de sécurité la maintient fermement au lit.
- Réglable en hauteur.



**Barre de lit réglable en hauteur**

- S'adapte au sommier à lattes ou tapissier.
- Les deux pieds sont posés au sol, le cadre tient solidement en place par trois sangles à fixer au lit.



**Barre d'accès au lit extensible**

- Se place tout simplement entre le matelas et le sommier.
- Aucune fixation complémentaire.
- Réglable en écartement pour s'adapter au lit une ou deux places.




Photos et dimensions non contractuelles

Pour plus de confort et de praticité, la table de lit permet aux personnes alitées ou en fauteuil de déjeuner et lire.

### Table de lit petit et grand plateau

- Table réglable en hauteur et en inclinaison.
- Inclinaison 15° pour une utilisation dans un fauteuil.
- Pliable pour le rangement.
- Jonc de protection anti poussière, utilisable comme repose-livre.
- 4 roulettes dont 2 à frein.

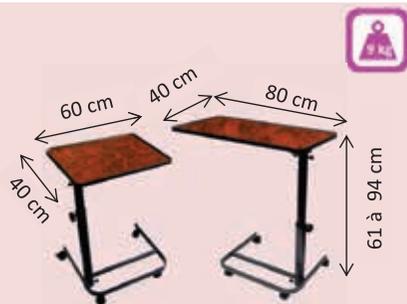

### Table de lit inclinable doubles plateaux

- Grand plateau réglable en hauteur, en inclinaison et coulissement latéral.
- Plateau latéral fixe.
- Baguette de rétention.
- 4 roulettes dont 2 à frein.



### Table de lit en U

- Réglable en hauteur et en largeur.
- Sa forme arrondie à l'avant est utile pour les personnes en fauteuil roulant.
- Plateau stratifié avec effet bois.
- Baguettes pour éviter la chute d'objets.
- 4 roulettes à frein.




Photos et dimensions non contractuelles

Afin de faciliter le maintien à domicile, il existe différents accessoires qui s'adaptent au lit pour répondre au mieux aux besoins du patient. (appui dos, potence sur socle ....)

### Appui dos relève buste

- Constitue une alternative au lit médicalisé.
- Il s'incline selon l'angle souhaité pour permettre une position assise ou juste relevée au lit.

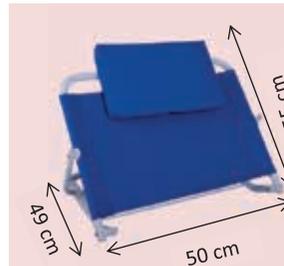

### Potence sur socle

- Assiste au lever.
- Poignée de levage.
- Pieds en U qui s'adapte sous le lit.
- Constitue une alternative au lit médicalisé.




### Pieds à sérum

- Réglable en hauteur.
- Socle composé de 5 roulettes ;
- 4 crochets supportent les poches à perfusion, nutriments ....



### Arceau de lit

- Evite le contact et soulage du poids des draps et des couvertures sur les parties endolories du corps.
- A la fois résistant et léger.

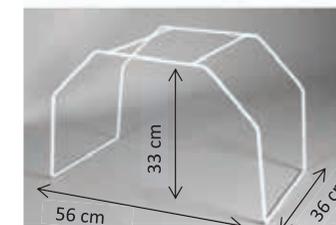

Photos et dimensions non contractuelles

Le fauteuil de repos est conçu pour la détente. Choisissez la position qui convient à chaque moment de la journée grâce à son dossier inclinable et repose jambe.

### Fauteuil de repos manuel avec repose-jambes

- Dossier inclinable à 45°.
- Repose jambes à allongement automatique dépendant de l'inclinaison du dossier.
- Accoudoirs réglables en hauteur.
- 2 roulettes à l'arrière pour faciliter son déplacement.



### Fauteuil de repos manuel avec pouf inclinable

- Dossier inclinable à 45°.
- Accoudoirs réglables en hauteur.
- Pouf inclinable.
- 2 roulettes à l'arrière pour faciliter son déplacement.



Photos et dimensions non contractuelles

Le fauteuil releveur électrique vous apportera plus de confort au quotidien et soulagera votre dos et vos articulations. Il est équipé d'un système d'aide à la levée. Il vous aide à vous lever et à vous asseoir sans effort.

#### ANGLE D'INCLINAISON

- Plus l'angle est grand, plus il vous relèvera haut.



#### ENCOMBREMENT AU SOL

- Attention à prévoir un espace derrière le fauteuil pour lui permettre de se relever.
- Soyez attentif aux dimensions du fauteuil pour évaluer l'encombrement dans votre domicile.

#### ATTENTION A BIEN PRENDRE VOS MESURES

- Largeur de bassin.
- Longueur de cuisse : depuis le creux du genou jusqu'au bas du dos.
- Hauteur des jambes (depuis le talon jusqu'au creux du genou).



#### POUR SECURISER VOTRE LEVEE

- Veillez à bien poser vos pieds au sol.
- Maintenez vos mains sur les accoudoirs.

### Fauteuil releveur électrique

- 3 positions : assise, levée et allongée pour se relaxer.
- Version 2 moteurs permet un réglage distinct entre le dossier et le relève jambes.
- Pochette porte livres.



Photos et dimensions non contractuelles

### Fauteuil releveur électrique dos au mur

- Idéal pour les petits espaces grâce à une faible distance entre le dossier du fauteuil releveur et le mur.
- 3 positions : assise, levée et allongée pour se relaxer.
- Version 2 moteurs permet un réglage distinct entre le dossier et le relève-jambes.



Le fauteuil coquille manuel ou électrique facilite le maintien et le confort de l'utilisateur.

Il est destiné aux personnes ayant des difficultés pour se maintenir seule en position assise et qui restent dans cette position durant une grande partie de la journée.

Equipés de roues, ce fauteuil peut être déplacé par un aidant à l'intérieur comme à l'extérieur de la maison.

**Conditions requises pour bénéficier du remboursement d'un siège coquille :**



- Convient aux personnes ne pouvant se maintenir en position assise sans système de soutien.
- La prise en charge d'un fauteuil coquille est soumise à une demande d'entente préalable auprès de l'organisme d'affiliation.
- La prescription doit être libellée comme suit : « L'état de santé de M/Mme ..... classé(e) nécessite l'achat d'un fauteuil coquille + tablette amovible. »

**Siège coquille manuel d'intérieur**

- Un coussin d'assise de 80 mm d'épaisseur est fourni.
- Appui-tête rembourré.
- Sangles 5 points d'origine.
- Palette repose-pieds monobloc montée sur ressort afin de pouvoir rester debout sur cette palette lors du transfert.
- Piètement 5 roulettes dont une directionnelle.



Photos et dimensions non contractuelles

**Siège coquille manuel intérieur et extérieur**

- 4 roues dont 2 grandes roues arrière et 2 roues avant 6 pouces directionnelles.
- Repose-jambes à allongement automatique indépendant.
- Support palette repose-pieds monté sur ressort.



**Siège coquille électrique**

- Repose-jambes inclinable électriquement.
- Inclinaison électrique de la coque et aide à la sortie de la personne grâce à l'assise électrique relevable.
- Coussin appui tête.
- Tablette.



Photos et dimensions non contractuelles